



Kompatibel mit den folgenden Pens:

Lilly • Novo Nordisk • Sanofi-Aventis • Owen Mumford • Berlin Chemie •
Ypsomed • B.Braun

Notizen

Ihre diabetische Versorgung mit Hilfsmitteln zur Blutzuckermessung

Gewerbering 6 - 84576 Teising
Telefon 08633 8983-600 / Fax 08633 8983-630
info@woellzenmueller.de - www.woellzenmueller.de

alphacheck professional NFC eco

Das Blutzuckermessgerät als Einzelprodukt (ohne Zubehör)



mg/dl eco
PZN: 12910776
Artikelnummer: 01100020

Erfüllt die Norm DIN EN ISO 15197:2013



Das alphacheck professional Blutzuckermessgerät, ein Gerät der neuen und modernen Generation, ist sehr einfach in der Handhabung. Mit sehr wenig Blut von 0,5 µL erreichen Sie in nur 5 Sekunden ein präzises Messergebnis. Es besitzt eine Malzeitenmarkierung mit Alarmfunktion.

Die Auswurfaste vereinfacht das Entsorgen des benutzten Teststreifens.

Funktionen

- Leichte Bedienung
- USB-Anschluss mit Schutzvorrichtung
- Mahlzeiten-Markierung inkl. Alarmfunktion
- Messbereich 20-600 mg/dl - 1,1 - 33,3 mmol/L
- 1000 Speicherplätze
- NFC - Near-Field-Communication

TESTSTREIFEN



PZN: 09208529
Artikelnummer: AK-003



Sip-In Technik



kein unhygienisches Blutverschmieren



akkurate Messergebnisse




geringe Blutmenge von 0,5 µL

Die alphacheck professional Teststreifen sind sehr handlich und bieten akkurate Messergebnisse durch die besondere Biosensortechnologie in nur 5 Sekunden. Die benötigte sehr geringe Blutmenge von nur 0,5 µL wird automatisch (Sip-In Technik) in den alphacheck professional Teststreifen eingesogen. Somit wird unhygienisches Blutverschmieren vermieden.

KONTROLLÖSUNG



PZN: 12671828
Artikelnummer: 01100045
HIMI: 21.99.99.1002

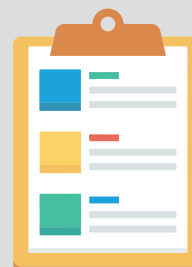

Die alphacheck professional Kontrolllösung dient zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Gerätes und der dazugehörigen Teststreifen. Ebenso kann sie wie folgt genutzt werden:

- falls Sie ohne Blutprobe eine Messung zu Übungszwecken durchführen wollen.
- falls Sie vermuten, dass Teststreifen und Messgerät nicht richtig funktionieren.
- falls Sie vermuten, dass die Messergebnisse nicht korrekt sind oder nicht dem eigentlichen Befinden entsprechen.
- wenn Sie eine neue LOT des Teststreifens anbrechen.
- wenn sie nach den Richtlinien der Bundesärztekammer den RiliBÄK Test tätigen möchten.



3

Schmerzminimaler Einstich durch 3-Fach feingeschliffene Nadel

TRBA 250

Anlehnend an die TRBA 250

↺

Automatisch rückziehende Nadel

②

Garantierter Einmalgebrauch

Die alphacheck professional Lanzetten sind einfach in der Handhabung, da Sie keine Stechhilfe benötigen. Kein lästiges Einsetzen der normalen Lanzette in die Stechhilfe nötig. Sie tätigt einen schmerzminimalen Einstich und bringt trotzdem ausreichend Blut für Ihre Messung auf.

Die benutzte Lanzette wird nach dem Gebrauch komplett verriegelt, sodass keine weitere Verletzungsgefahr vorhanden ist und der Einmalgebrauch garantiert ist.

in den folgenden Größen verfügbar:



30G x 1,6 mm - 100 St. PZN: 11607432 Art: AK-30-100 HIMI: 21.99.99.1001	28G x 1,6 mm - 100 St. PZN: 11607426 Art: AK-28-100 HIMI: 21.99.99.1001	26G x 1,6 mm - 100 St. PZN: 11280681 Art: AK-26-100 HIMI: 21.99.99.1001	23G x 1,6 mm - 100 St. PZN: 11280669 Art: AK-23-100 HIMI: 21.99.99.1001
---	---	---	---